

REACTION™




**iLa reacción
que ha estado
buscando!**

¿Qué reacción está buscando?

Si ha estado buscando una solución que ofrece un enfoque todo en uno para el moldeado corporal y facial, la reducción de la celulitis y el estiramiento de la piel, no busque más- Reaction™ de Viora es para usted. Reaction™ es un equipo multifrecuencia de RF con terapia de vacío, que ofrece soluciones para los tratamientos estéticos más solicitados.



Líneas y Arrugas

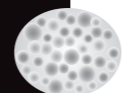

Celulitis



Reducción de la circunferencia



Tejido Cicatricial



Tonificación cutánea



Moldeado



Estrías

Su Reaction

Como profesional médico estético, su consultorio necesita la flexibilidad de una solución no invasiva que le permita proporcionar tratamientos más eficientes y eficaces a sus clientes. Reaction™, que cuenta con la revolucionaria tecnología CORE™, usa una combinación avanzada de terapia de RF y vacío para satisfacer sus necesidades y le brinda la capacidad de ofrecer tratamientos faciales y corporales en un sólo equipo instead, lo que garantiza una real comodidad y satisfacción para sus pacientes.

La Reaction de sus Clientes

La satisfacción de sus clientes es un objetivo clave y usted puede asegurarse de esto con Reaction™. Proporcionar soluciones no invasivas para los procedimientos médico estéticos más solicitados, sus pacientes pueden ver resultados rápidos y visibles. La tecnología avanzada Reaction™ garantiza una precisión mejorada y la mayor flexibilidad, con la promesa de tratamientos más seguros, más confortables, con periodos de tratamiento más cortos.

Cómo trabaja Reaction™ de Viora

Utilizando diferentes frecuencias de RF y los niveles disponibles de terapia de vacío, Reaction™ puede orientarse a un estrato específico de piel para calentar con exactitud la red subyacente de fibras de colágeno y elastina y aumentar la velocidad metabólica del tejido subcutáneo. Debido al modo multicanal de cuatro canales, Reaction™ tiene la capacidad de calentar todos los estratos dérmicos simultáneamente, para acelerar el proceso de calentamiento. Luego de este tratamiento local, el colágeno se encoge y se rompen los enlaces cruzados de colágeno rígido, y se, recuperándose así la flexibilidad de la piel y engrosamiento la dermis. Esto da por resultado una piel más firme, más elástica sin la necesidad de usar anestesia local o preparaciones previas o posteriores. Mediante la combinación de terapia de vacío, Reaction™ maximiza la penetración de energía en el área de tratamiento, incrementa la circulación de sangre en el área, estimula el drenaje linfático y colabora con la disminución del volumen de las células de grasa.



Flexibilidad de Reaction™

Los tres aplicadores ergonómicamente diseñados de Reaction™ le permite tratar áreas grandes, pequeñas y sensibles. El aplicador de contorno B incorpora RF y terapia de vacío y le permite tratar los muslos, los glúteos y el abdomen con facilidad, mientras que el aplicador F, también con vacío, se usa en áreas más pequeñas y más sensibles como el mentón, el cuello, la parte interna de los muslos y las axilas. El aplicador ST trata la piel laxa y flácida, el tejido cicatricial y las estrías sobre el rostro y el cuerpo con RF y un mecanismo de enfriamiento cutáneo TEC integrado, para proteger el estrato epidérmico y garantizar la máxima comodidad de sus pacientes.

Estudio de caso Reaction™



Mujer de 55 años que tenía arrugas y piel laxa en el rostro se sometió a tratamiento con Reaction. Luego de 2 sesiones realizadas con una diferencia de 3 semanas, en las que se utilizó el aplicador ST, se observa una reducción muy marcada de las arrugas y una piel visiblemente más firme.

“Reaction™ usa la más moderna tecnología de radiofrecuencia y me permite reducir la celulitis, reducir el volumen de la grasa y tensar la piel, todo con un único equipo. En el pasado, habría necesitado dos o tres equipos por separado para ofrecer estos resultados. Reaction™ me ha permitido expandir el tipo de procedimientos estéticos no quirúrgicos que puedo ofrecer a mis pacientes y los resultados han sido excelentes.”


- Dr. Matthew Schulman, M.D.

La ventaja CORE™

La tecnología CORE™ de Reaction™ presenta tres canales de RF distintos (0.8MHz, 1.7MHz y 2.45MHz) y un cuarto modo multicanal adicional, que incluye a las tres frecuencias de RF. Con múltiples frecuencias de RF, Reaction™ proporciona un control superior del tratamiento, mayor precisión, un efecto dérmico más amplio y más alta absorción de energía, lo que asegura resultados clínicos optimizados.

La acción del vacío

Al agregar el poder de la terapia de vacío a la tecnología de la RF, Reaction™ puede asegurar una penetración aún más profunda del calor, lo que mejora el proceso del tratamiento. Asimismo, los cuatro niveles de vacío ofrecidos aumentan el flujo sanguíneo y mejoran el drenaje linfático, lo que activa el metabolismo para reducir los compartimientos de grasa y estimular mecánicamente los fibroblastos.

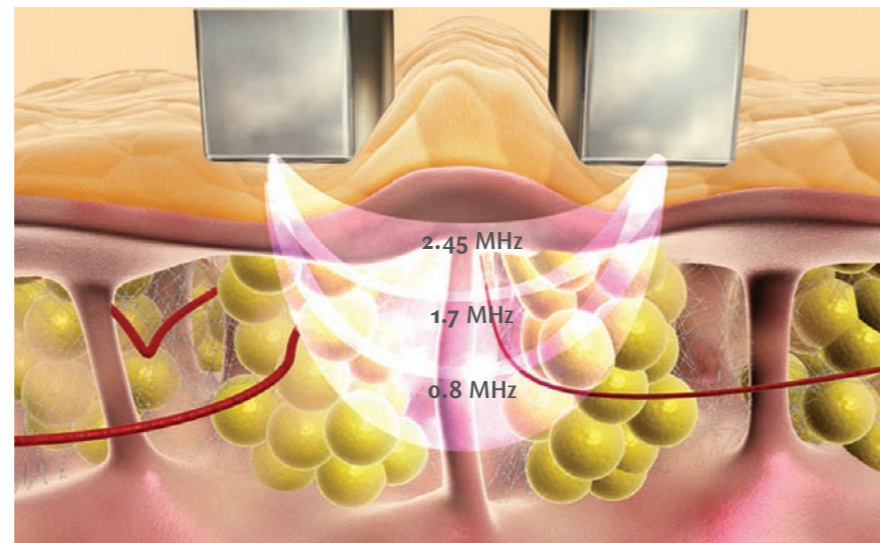

Tecnología probada para resultados probados


Viora llevó a cabo estudios *in vivo* para determinar la penetración del calor, la influencia del vacío y el efecto del calor sobre la circulación sanguínea. Se realizaron experimentos con cerdos (*Sus scrofa domestica*) totalmente anestesiados, durante los que se variaron la frecuencia de la RF y los niveles de vacío. Estas pruebas confirmaron la validez de la tecnología, al corroborar que el médico puede controlar la profundidad de la penetración, abocarse a diferentes tejidos para diferentes tratamientos y obtener temperaturas eficaces en menos tiempo. La efectividad de las frecuencias múltiples y la terapia de vacío usadas simultáneamente se traducen en sesiones de tratamiento más rápidas y cortas, lo que le brinda la capacidad de atender a más pacientes.

Influencia del vacío

Applicator	Profundidad de la frecuencia medida	Nivel de vacío	Profundidad medida
FC	0.8MHz	1	8.0mm
	0.8MHz	4	10.7mm
	2.45MHz	1	4.2mm
	2.45MHz	4	6.4mm
BC	0.8MHz	1	11.3mm
	0.8MHz	4	18.6mm
	2.45MHz	1	6.2mm
	2.45MHz	4	11.8mm

Utilizar la terapia de vacío con los aplicadores de contorno F y de contorno B proporciona una mayor penetración del calor.

Efecto del calentamiento sobre los vasos sanguíneos

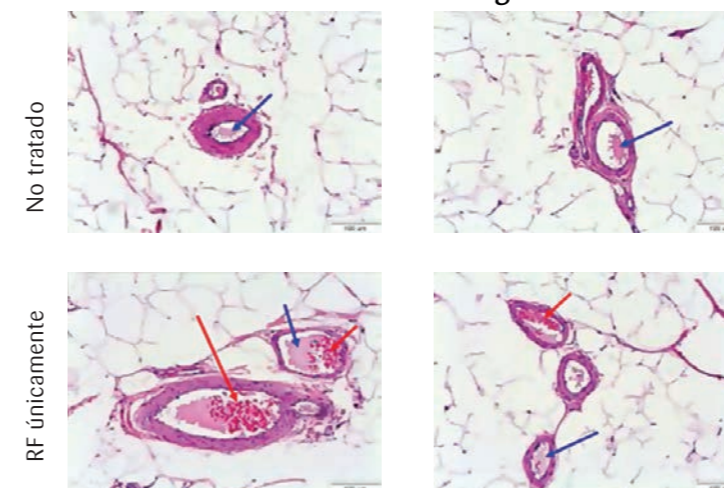


Las muestras de grasa subcutánea se seccionaron con la técnica de PET (30 µ) y se tiñeron con H&E

En el análisis cuantitativo superior, se muestra la mayor presencia de glóbulos rojos 48 horas después del tratamiento con Reaction™ (ver las flechas rojas). Asimismo, se observa más fluido plasmático, prueba de una mayor circulación sanguínea (ver las flechas azules).

Penetración de la energía

Imágenes infrarrojas de un corte transversal de la piel

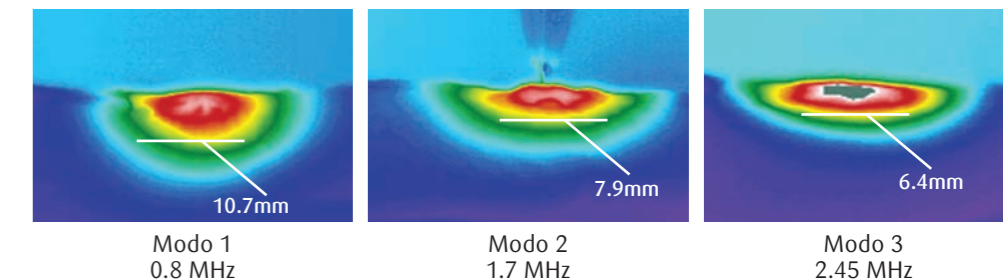

El médico tiene pleno control de la profundidad de penetración del calor con el aplicador de contorno F (ver la imagen superior), al combinar los diferentes modos de RF con las diversas opciones de niveles de vacío. Esto permite el tratamiento ideal, dependiendo del área del cuerpo y la sensibilidad del paciente.

Especificaciones del producto

	BC	FC	ST
Energía RF	Hasta 130 J/cm/3	Hasta 50w	Hasta 20w
Modo RF 1	0.8MHz	0.8MHz	0.8MHz
Modo RF 2	1.7MHz	1.7MHz	1.7MHz
Modo RF 3	2.45MHz	2.45MHz	2.45MHz
Modo RF 4	0.8MHz, 1.7MHz, 2.45MHz	0.8MHz, 1.7MHz, 2.45MHz	0.8MHz, 1.7MHz, 2.45MHz
Vacío	NO	Por Pulso	Por Pulso
Área de Tratamiento	8mmx8mm	35mmx30mm	15mmx10mm
Peso	17 kg. - de escritorio 19 kg. - base de rueda		
Dimensiones	45 ALTO x 35 ANCHO x 40 PROFUNDIDAD		
Requerimientos Eléctricos	90-264 VAC; 50/60 Hz; Fase Simple		

“El mejoramiento es visible luego de la primera sesión y aumenta con las sesiones sucesivas. Hemos usado Reaction™ con muchos pacientes y podemos informar una tasa de satisfacción del 85%. El procedimiento no es tan caro y da resultado.”

- Dr. Daniel Man, Cirujano Plástico Board Certified

Los pacientes que son sometidos a tratamientos con Reaction™ de Viora permanentemente han estado contentos y satisfechos con sus resultados.

Debido a las ventajas de la tecnología CORE™, Viora ha sido capaz de desarrollar protocolos especiales con un concepto innovador de tratamientos.

ReFit

Tratar la piel flácida y laxa después de una pérdida extrema y rápida de peso, ya sea por el parto, dieta, ejercicio o procedimiento quirúrgico.




Resultados luego de la 5 sesión de tratamiento



Resultados de ReFit luego de 4 sesiones

ReLift


Atender los efectos del envejecimiento y de la gravedad sobre la piel caída y flácida en la mandíbula inferior.

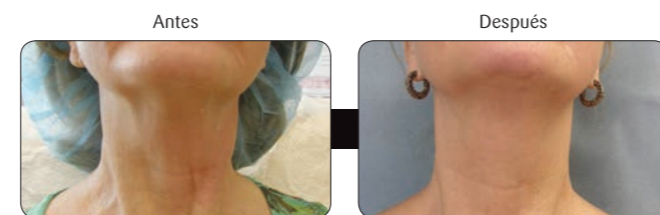


Resultados de ReLift luego de 9 sesiones



Resultados luego de la 4 sesión de tratamiento

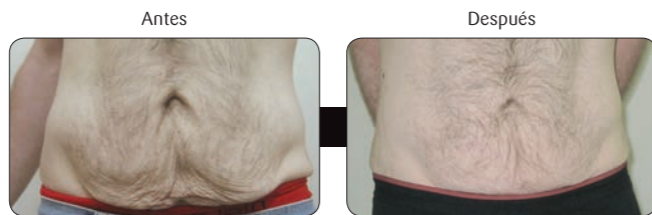

Resultados de ReFit luego de 8 sesiones

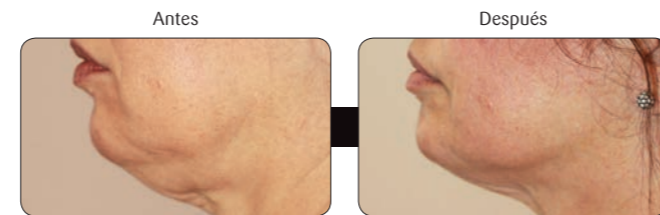

Resultados de ReLift luego de 6 sesiones

"Hoy tengo una perspectiva completamente diferente de mi cuerpo y todos los que me conocen ven eso enseguida. Soy más positiva y tengo más confianza que nunca en mi piel y estoy más que satisfecha con quien soy hoy en día. Recomiendo especialmente los tratamientos ReFit de Viora, me han ayudado a cambiar mi vida!"

- E.M., paciente

ReVive

Presenta una alternativa no invasiva para el tejido vulvar estirado y laxo, para las mujeres que sufren de pérdida de la fuerza y el tono en dicho tejido, ya sea debido a partos, genética, traumas, edad o pérdida de peso.



Compromiso vigente de Viora

Cuando usted incorpora Reaction™ en su práctica, Viora ofrecerá lo mejor en comercialización, apoyo clínico y técnico disponible. Estas actuales herramientas y técnicas, le permitirán estar seguro, sabiendo que se ha asociado con una empresa estable y comprometida para su éxito.w

We build time machines...
so you can shape the future.

Acerca de Viora

A Viora, un proveedor líder en soluciones médico-estéticas, que le apasiona ayudar a los clientes a proporcionar los resultados más eficaces a sus pacientes. Viora mejora las experiencias de tratamiento perfeccionando la tecnología existente para dar a los clientes las mejores soluciones no invasivas disponibles. Con presencia en más 65 países, los productos no invasivos de Viora abarcan una amplia gama de síntomas, con las aplicaciones más solicitadas en la actualidad para el tratamiento anti-envejecimiento, moldeado corporal y facial, reducción de la celulitis, eliminación del acné, reducción de estrías, eliminación de vello, blanqueamiento de la piel y mucho más.

www.vioramed.com | info@vioramed.com |  [vioramed](#)



Aprobado por la FDA para el alivio de dolores musculares menores, espasmos musculares, mejora temporal de la circulación sanguínea local y la reducción temporal en la apariencia de la celulitis.